



Expérience et Innovation Masque nasal gel ComfortGel Blue

ComfortGel Blue – la nouvelle génération de masque ComfortGel pour toujours plus de confort et d'efficacité.

Grâce à un niveau de confort encore plus élevé et à une approche globale améliorée, vos patients seront toujours plus nombreux à adopter le nouveau masque ComfortGel Blue.

Fidèles à nos masques en gel bleu dont l'efficacité n'est plus à démontrer, nous avons su conserver les caractéristiques de confort et de souplesse plébiscitées partout dans le monde et avons cherché à améliorer encore davantage le confort du patient. Nous avons incorporé une cale frontale conçue pour aider à réduire les points de pression, et développé un dispositif expiratoire

à micro-diffusion avec raccord rotatif intégré qui dirige en silence la fuite intentionnelle vers le haut et à distance du conjoint.

Nous avons également adopté une nouvelle formulation de gel. Tout a été conçu dans l'intention d'offrir au patient un meilleur confort – ainsi qu'une meilleure observance.

De plus, en utilisant le masque ComfortGel Blue avec System One Resistance Control de Philips Respironics, vous obtiendrez un traitement par pression positive et un confort thérapeutique optimaux.

ComfortGel Blue et notre gamme complète de masques prennent une longueur d'avance, au service de TOUS vos patients, en TOUTES circonstances.

PHILIPS

RESPIRONICS


sense and simplicity

Le harnais Premium universel avec languettes EZ Peel se règle aisément en quatre endroits pour un ajustement sûr et individualisé.

Le voile de confort en silicone améliore l'étanchéité et peut être retiré pour faciliter le nettoyage.

Le coussin bénéficiant de la technologie de gel nouvelle génération est souple et s'adapte au visage du patient pour un confort amélioré.

Les attaches du harnais à rotule donnent une liberté de mouvement et facilitent le retrait du masque.

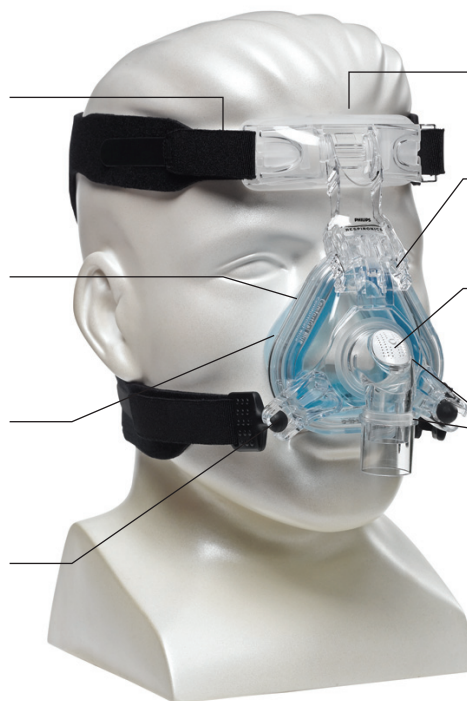


La cale frontale Premium améliore le confort et l'ajustement.

Le bras d'appui frontal peut monter et descendre de manière à obtenir un angle, une étanchéité et un ajustement appropriés du masque.

La fuite micro-diffuse permet de réduire le niveau sonore et évacue l'air à distance de la personne allongée à côté.

Deux raccords rotatifs de 360° permettent au circuit de bouger plus librement.

La désignation et la référence du produit sont indiquées sur la coque pour en simplifier l'identification.

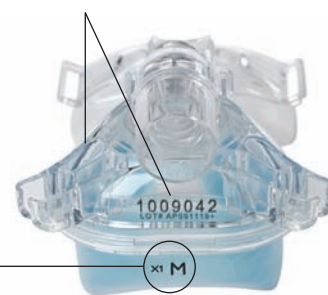

Les tailles et les réglages System One Resistance Control sont imprimés à la base du coussin.

Informations de commande

Masque ComfortGel Blue	Très petit (P)	Petit (S)	Moyen (M)	Large (L)
Masque avec harnais	1070067	1070066	1070065	1070064
Masque avec harnais, sans dispositif expiratoire	1070071	1070070	1070069	1070068
Coussins de remplacement	Très petit (P)	Petit (S)	Moyen (M)	Large (L)
Coussin et voile ComfortGel Blue	1070108	1070107	1070106	1070105
Coussin ComfortGel Blue	1070104	1070103	1070102	1070101
Accessoires		Références		
Cale frontale Premium		1040114		
Harnais Premium		1033678		
Attaches-rapides à rotule, 2 par lot		1009723		
Gabarit de tailles ComfortGel Blue		1012040		

Respironics, ComfortGel, Comfort Flap, Quick Clip, StabilitySelector et System One sont des marques commerciales de Respironics, Inc. et de ses filiales, tous droits réservés.

Veuillez consulter le site www.philips.com/



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Philips Healthcare se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

Broudy NA 9/8/10 MCI 4103566 PN 1078591

Philips Healthcare, une division de Royal Philips Electronics

Philips Respironics Le Siège Principal International
+33 1 47 28 30 82

Philips Respironics France
+33 2 51 89 36 00

Philips Respironics Suisse
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics
1010 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
Service Client
+1 724 387 4000
800 345 6443 (toll free, US only)
www.philips.com/respironics
www.respironics.fr